



MAQUET
GETINGE GROUP


MINIFLOW® - uniwersalny generator/przyłącze pacjenta do terapii nCPAP z respiratora noworodkowego.

Informacje ogólne.

W trosce o poprawę komfortu pacjenta, jakim jest noworodek, waga przyłącza MINIFLOW® została zminimalizowana do zaledwie 10g, a poziom emitowanego hałasu jest bardzo niski. W celu uniknięcia urazów okolic nosa, podczas terapii z zastosowaniem przyłącza MINIFLOW® można zamiennie stosować końcówki donosowe oraz maski neonatologiczne.

System MINIFLOW® jest kompletnym systemem do zastosowania w trybach NIV NAVA oraz nCPAP z respiratora SERVO-I, SERVO-N. MINIFLOW® jest produktem jednorazowym. System MINIFLOW® składa się z przyłącza pacjenta oraz pełnego zakresu końcówek donosowych, masek neonatologicznych i czapeczek do mocowania systemu.

Generator MINIFLOW® został opracowany tak, aby zminimalizować występowanie przestrzeni martwej podczas terapii nCPAP. Dodatkowo zastosowany przegub umożliwia regulację kąta położenia maseczki neonatologicznej bądź końcówek donosowych minimalizując przeciek podczas ruchów pacjenta oraz ograniczając odleżyny. Zakres regulacji nachylenia dysz to 45° do 60° względem głowy pacjenta.

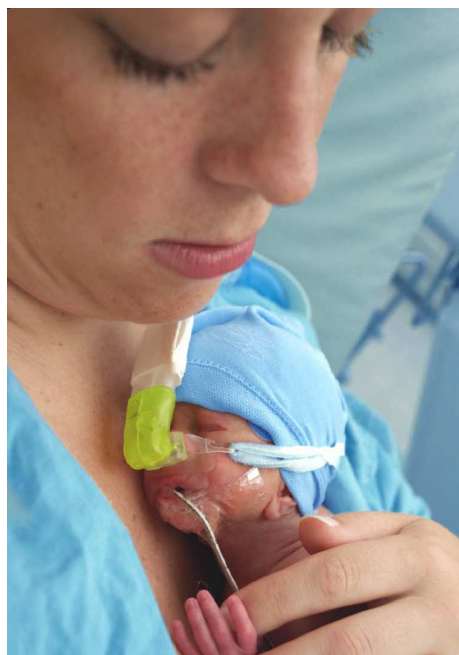

Zastosowanie karbowanych rurek w przyłączu, umożliwia prawidłowe ustabilizowanie generatora na głowie pacjenta za pomocą czapeczek i gąbki (podkładki).

MINIFLOW® jako uniwersalny generator może być używany z większością noworodkowych respiratorów z funkcją nCPAP dostępnych na polskim rynku.

AKCESORIA



Przyłącze MINIFLOW® wraz z akcesoriami to gwarancja uzyskania prawidłowego stałego dodatniego ciśnienia w drogach oddechowych u noworodków oraz wcześniaków.



Maseczki neonatologiczne – jednorazowe maseczki neonatologiczne dostępne są dla wcześniaków już od 500g.



Końcówki donosowe - jednorazowe końcówki donosowe tak samo jak maseczki neonatologiczne dostępne są już dla pacjentów od 500g.

W przypadku stosowania generatorów MINIFLOW® zaleca się używanie naprzemiennie maseczek oraz końcówek donosowych dodatkowo bardzo istotną sprawą podczas prawidłowego mocowania generatora MINIFLOW® jest dobór czapeczki.



Czapeczki jednorazowe z rzepem – jednorazowe czapeczki zostały przystosowane do mocowania generatora MINIFLOW® dzięki dołączonym rzepom. Każdy z rozmiarów czapeczki posiada indywidualny kolor co umożliwia i ułatwia dobór rozmiaru. Dodatkowo do każdego generatora MINIFLOW® dodawana jest taśma miernicza ułatwiająca odpowiedni dobór czapeczki w stosunku do wielkości główki pacjenta.



Gąbka/podkładka do mocowania generatora

Dodatkowe tasiemki do mocowania




Filtry Servo Duo Guard – jednorazowego użytku filtr antybakteryjny i antywirusowy przeznaczony do stosowania podczas wsparcia oddechowego lub też podczas zabiegów operacyjnych. Główną zaletą dwustopniowego filtra **Servo Duo Guard** jest zmniejszenie do minimum nagłego wzrostu oporu oddechowego dzięki połączeniu filtra HEPA z filtrem elektrostatycznym.

Filtr zapewnia filtrację minimalizując możliwość wystąpienia skażenia na drodze pomiędzy pacjentem i urządzeniem. (skuteczność antybakteryjna i antywirusowa wynosi 99,9999%).

Dodatkowo przezroczysta obudowa zapewnia możliwość kontrolowania stanu filtra **Servo Duo Guard** podczas pracy.

Należy wymieniać co 48 godzin.

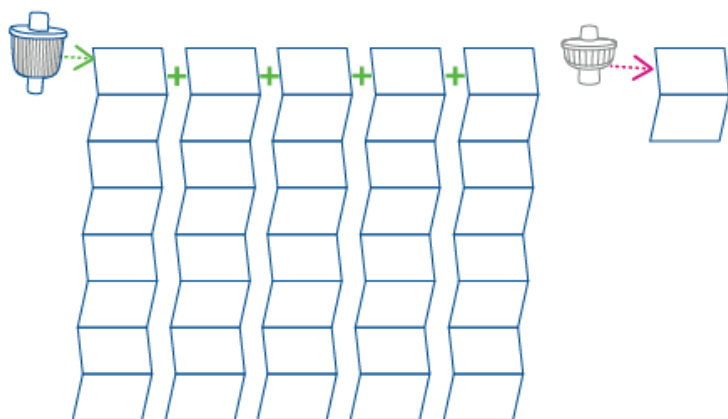

Filtry **Servo Duo Guard** posiadają 20-to krotnie większą powierzchnię filtracji w stosunku do standardowych.

W ofercie znajdują się również:



- Płuco testowe do respiratorów SERVO
- Układ oddechowy dedykowane do respiratorów SERVO
- Czujnik EDI do sytemu NAVA