

S-SCORT VX-2

odsysacz wydzielin - przenośny i do montażu w pojazdach - do udzielania pomocy przed hospitalizacją pacjenta



Wspornik dostarczany w opcji wraz z ładowarką utrzymuje zespół w danej pozycji przy nacisku siły 10G oraz zasil i ładuje urządzenie poprzez instalację elektryczną pojazdu.

VX-2™ S-SCORT® to przenośny odsysacz wydzielin, masywny i niezawodny, zasilany przez baterię. Mocny i wszechstronny, odpowiada wymogom krajowych norm i umożliwia personelowi medycznemu łatwe wykorzystanie zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz pojazdu.

Dwa sposoby zasilania VX-2

Wspornik dostarczany w opcji wraz z ładowarką utrzymuje urządzenie w niezmienniej pozycji, zapewnia zasilanie w przypadku stosowania odsysacza wydzielin wewnątrz pojazdu i równocześnie ładuje jego baterię.

Po zdjęciu ze wspornika **VX-2** przekształca się w przenośny odsysacz wydzielin – wszechstronny, niezawodny, ekonomiczny i wielofunkcyjny.

SSCOR, INC.

Dystrybutor w Polsce:



Odsysacz wydzielin do udzielania pierwszej pomocy VX-2 S-SCORT

Jak wszystkie odsysacze S-SCORT® model VX-2™ jest wyjątkowo silny. Zasilany przez zaplombowane baterie ołowiowe kwasowe, w celu zapewnienia większej niezawodności może być wyposażony w dwupozycyjny regulator, prosty i łatwy w użyciu, a także w zbiornik gromadzący wydzieliny jednorazowego użytku i system przewodów zbiorczych.


Battery care system VX-2 szybko ładuje baterie i ustawia się w pozycji „standby”, jeżeli bateria jest maksymalnie naładowana eliminując niebezpieczeństwo nadmiernego jej naładowania. Ponadto, informuje osobę obsługującą urządzenie o czasie działania baterii, jaki jeszcze pozostał i automatycznie odłącza rozładowaną baterię w celu uniknięcia uszkodzeń spowodowanych całkowitym jej rozładowaniem.

Nowe właściwości urządzenia VX-2:

- Wskaźnik stanu baterii z 3 diodami i 5 stadiami.
- Przyciski sterujące umieszczone na zewnętrznym przednim panelu ułatwiające stosowanie urządzenia wewnątrz pojazdu, kiedy urządzenie znajduje się w wspomniku.
- Regulator zmienny i wskaźnik w opcji
- System ostrzegający o *nienystarczającej pojemności baterii* informuje, kiedy należy wymienić baterię (zob. wskazówki na temat pojemności baterii na stronie www.sscor.com).
- W opcji dostępny także praktyczny pas do przewieszenia przez ramię umożliwiający umieszczenie w nim akcesoriów.



2310 – Dwupozycyjny regulator ułatwiający stosowanie urządzenia

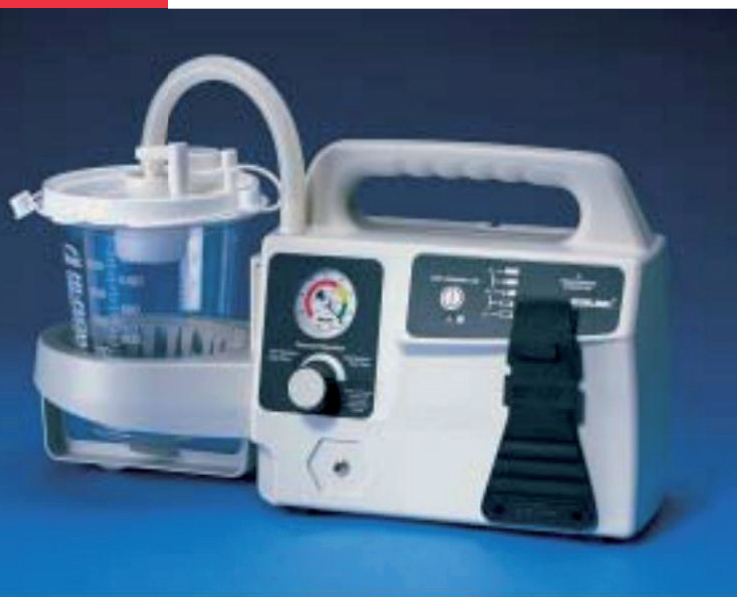

2310V – Regulator z pokrętkiem do pełnej kontroli przepływu

Wydajność: przepływ powietrza ponad 30l/min na końcu rurki dla pacjenta

Regulacja: próżnia od 50 mmHg do 550 mmHg

Wymiary (cm): 43,2 x 22,9 x 13,3

Ciężar: 3,9 kg

Ładowarka: automatyczna ładowarka wbudowana w urządzenie – zasilanie prąd stały z instalacji ambulanse

informacje potrzebne do zamówienia

2310 dwupozycyjny regulator
2310B dwupozycyjny regulator ze wspomnikiem/urządzeniem zasilającym
2310V regulator zmienny i wskaźnik
2310BV regulator zmienny i wskaźnik ze wspomnikiem/urządzeniem zasilającym
10064-600 ... pas do przewieszenia przez ramię
10064-700 ... pas do przewieszenia przez ramię z kieszenią na akcesoria

W celu zamówienia systemów do użycia z instalacjami elektrycznymi 220 - 240V oraz 100V należy dodać „230” po podaniu kodu wybranego modelu.

SSCOR, INC.

Dystrybutor w Polsce:

FHU INVEST MED
Ul. Warciańska 16
62-510 Konin – Wola Podłężna
e-mail: biuro@investmed.com.pl www.investmed.com.pl

